

# 위어리스 레이디얼 다이아프램™ 탱크 밸브 AJS 액추에이터

표준(90도) 레이디얼 다이아프램 밸브용 스테인레스강


## 특징 및 이점

- 사용량이 많은 환경을 위한 스테인레스강 구성
- 오래 지속되는 내구성을 위한 PTFE 부싱 및 EPDM O-링
- 프로세스 필요에 따라 선택하는 수동 및 공압식 제어 옵션
- 어느 제조업체의 스위치든 쉽게 장착
- 3년 보증




## 기술 자료

재료	
액추에이터 슬리브/하우징	304 스테인레스강
액추에이터 샤프트	Nitronic 60 또는 Gall-Tough® 스테인레스강
O-링	EPDM
씰	EPDM
베어링	나일론 케이지에 스테인레스강 쓰러스트 베어링 세트 2개가 있음
계기	
위치 표시	위치를 나타내는 샤프트는 밸브 위치의 시각적 확인을 제공합니다.
공압식 공기 연결 피팅	1/8인치 NPT(고압멸균 가능)
환경	
최대 압력	10bar(150psig)
최대 온도	135°C(275°F)
품질	
표준	BPE, CE-PED, ASME, 3A
ISO	모든 제품 및 절차는 ISO 9001 품질 보증 프로그램으로 규제됩니다.

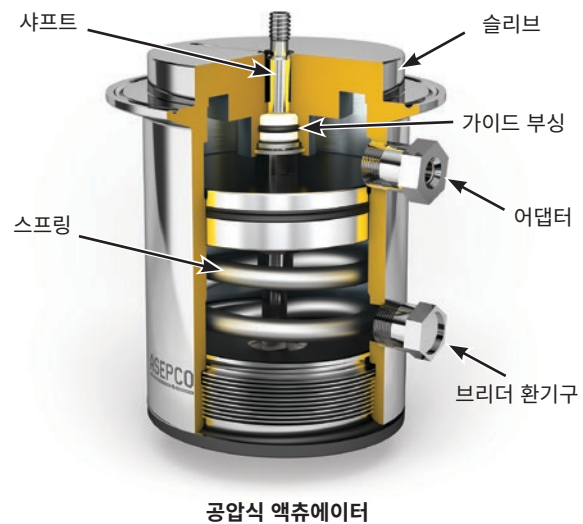

# 치수

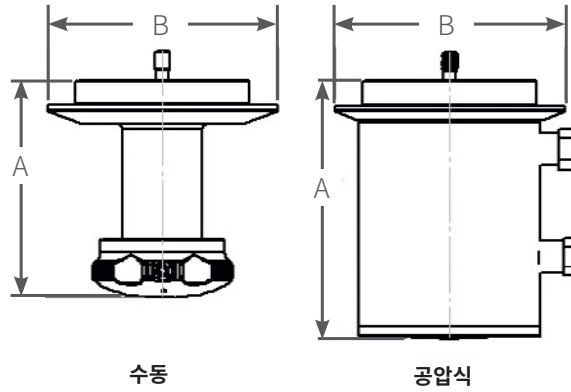

수동

공압식

### 수동 액츄에이터(MNXX 시리즈)

크기	A mm(인치)	B mm(인치)	최대 이동 mm(인치)	무게 (플라스틱 핸들 포함) kg(lb)	제거를 위한 필수 간극 mm(인치)
0.5	61.0(2.4)	50.8(2.0)	5.6(0.2)	0.5(1.1)	86.4(3.4)
1.0	71.1(2.8)	76.2(3.0)	7.9(0.3)	1.0(2.2)	104.1(4.1)
1.5	99.1(3.9)	76.2(3.0)	14.2(0.6)	1.1(2.4)	142.2(5.6)
2.0	111.8(4.4)	119.4(4.7)	14.2(0.6)	2.1(4.7)	142.2(5.6)
3.0	111.8(4.4)	119.4(4.7)	19.8(0.8)	2.1(4.7)	193.0(7.6)
4.0	139.7(5.5)	165.1(6.5)	25.4(1.0)	6.2(13.7)	246.4(9.7)

### 공압식 액츄에이터(PNXX 시리즈)

크기	A mm(인치)	B mm(인치)	최대 이동 mm(인치)	무게 kg(lb)	제거를 위한 필수 간극 mm(인치)
0.5	81.0(3.2)	50.8(2.0)	5.6(0.2)	0.7(1.6)	86.4(3.4)
1.0	111.0(4.4)	76.2(3.0)	7.9(0.3)	2.1(4.7)	104.1(4.1)
1.5	119.9(4.7)	76.2(3.0)	14.2(0.6)	2.1(4.7)	142.2(5.6)
2.0	132.1(5.2)	119.4(4.7)	14.2(0.6)	3.5(7.8)	142.2(5.6)
3.0	172.7(6.8)	119.4(4.7)	19.8(0.8)	10.0(22.1)	266.7(10.5)
4.0	236.7(9.3)	165.1(6.5)	25.4(1.0)	23.7(52.2)	355.6(14.0)

## 액츄에이터 옵션

액츄에이터에 대한 특정 옵션은 유형뿐만 아니라, 크기에 따라서도 달라집니다. 특정 액츄에이터에 대한 특정 옵션을 알아보려면 ASEPCO에 문의하십시오.

## 주문 정보

제품 번호	제품 설명
	<b>레이디얼 밸브 수동 액츄에이터</b>
MN05	0.5" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
MN10	1.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
MN17	1.5" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
MN20	2.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
MN30	3.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
MN40	4.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 수동 액츄에이터
	<b>레이디얼 밸브 공압식 액츄에이터</b>
PN05	0.5" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터
PN10	1.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터
PN17	1.5" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터
PN20	2.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터
PN30	3.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터
PN40	4.0" 위어리스 레이디얼 탱크 밸브 AJS 공압식 액츄에이터

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 ASEPCO는 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다. 해당 응용 분야에서 사용하기 위한 제품 적합성을 보장하는 것은 사용자의 책임입니다. 레이디얼 다이어그램은 ASEPCO Corporation의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.