

F-NBR 软管 25

F-NBR 软管

Bredel

Hose Pumps

特点和优势

- 白色食品接触内表面
- 符合 EC1935/2004 和 FDA 21CFR177.2600 并达到 3A 标准。
- 通过完全闭合的效果延长使用寿命
- 卓越吸入能力高达 9 mWC (354 inWC)
- 耐高压特性 16 bar (232 psi)
- 可重复的体积精度高达 $\pm 1\%$
- 处理高粘度产品时性能卓越
- 最高流体温度：80 °C (176 °F)，最低流体温度：-10 °C (14 °F)



技术规格

	F-NBR 软管 25
最大工作压力	16 bar
最大工作压力	232 psi
最大入口吸入能力	9 mWC
最大入口吸入能力	354 inWC
入口吸入能力 (80% 流量)	8 mWC
入口吸入能力 (80% 流量)	315 inWC
工作温度范围	-20 °C 至 45 °C
工作温度范围	-4 °F 至 113 °F
流体温度范围	-10 °C 至 80 °C
流体温度范围	14 °F 至 176 °F
孔径	25 mm
孔径	0.98 in
壁厚	14.1 mm
壁厚	0.555 in
长度	1005 mm
长度	39.9 in
重量	2 kg
重量	4.41 lbs

对于连续工作，建议产品温度最高不超过 60°C。但是，对于温度高达 80°C 的产品，建议采用间歇工作方式

您当地的 Bredel 销售办事处/分销商可根据具体应用来为您推荐正确的软管。为发挥最佳的泵性能，请使用 Bredel 原装软管润滑油（NSF 非食品化合物方案目录，H1 类）

主要材料


	F-NBR 软管 25
材料	F-NBR
内层	F-NBR
外层	天然橡胶 (NR)

软管成分



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

产品代码

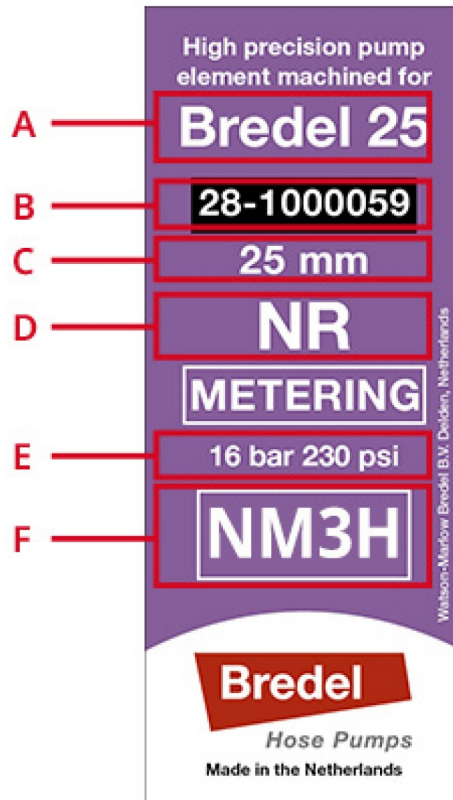

	标签代码
A	泵类型
B	重新订购编号
C	孔径
D	内层材料
E	最大允许压力
F	工厂代码 [material; year; month]

每条软管的一端都刻有工厂代码 [material; year; month] 和批号。

年：末位数字 (7 = 2017)

月：A = 1 月，E = 5 月

材料：A = NBR for Food，E = F-NBR，M = CSM，NM 或 NT = NR，P = NBR，S = EPDM

免责声明：我们认为本文在发布时所包含的信息正确无误，如有任何错误，Watson-Marlow Bredel BV 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。文件中所涉及到的数据是在试验平台的受控环境下取得的。由于温度、粘度、入口及出口压力或系统配置的不同，所达到的实际流量可能会不同。APEX、DuCoNite、Bioprene 和 Bredel 是注册商标。

wmfts.com/global



02 May 2024