

# 521F, 带 REMC 泵头

500 系列直联型泵



## 特点和优势

- 在 4 bar 的峰值压力下，520 系列 LoadSure 软管单元的流量高达 2000 ml/min
- 重型泵头结构，具有防冲击保护装置
- 弹簧转子使用带密封轴承的大尺寸低摩擦辊轮轻轻压缩软管，确保软管使用寿命长且计量准确
- 使用离合转子快速简单地设置泵头，以轻松安装软管单元



## 521F, 带 REMC 泵头 性能

LoadSure® 软管单元流量 (ml/min)			
软管材质	转速 (rpm)	3.2mm	6.4mm
Marprene TM, Bioprene TM	60	100	400
	213	360	1400
	291	490	2000
Sta-Pure PCS, STA-PURE PFL	60	110	420
	213	370	1500
	291	510	2000

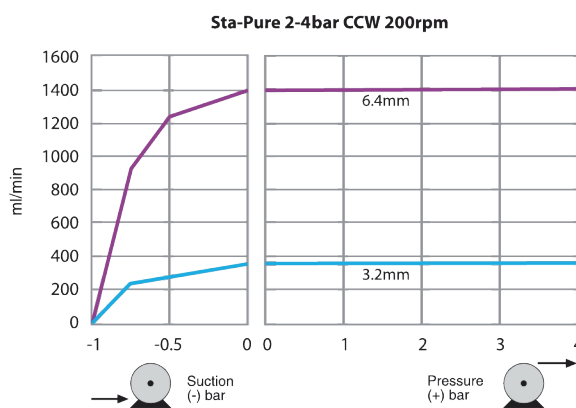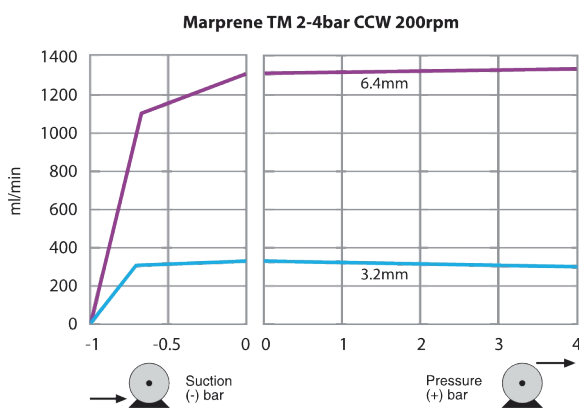

To achieve 4 bar pressure the pump must rotate counter-clockwise

## 技术规格

521F, 带 REMC 泵头	
最大流量	2000 ml/min
最小流量	100 ml/min
最大工作压力	4 bar
最大工作压力	60 psi
环境温度范围	5 至 40 °C
环境温度范围	41 至 104 °F
流体温度范围	-20 至 80 °C
流体温度范围	-4 至 175 °F
电机类型	交流电机
最大工作速度	291 rpm
标准	CE
防护等级	IP55
噪声	<70dB(A) @ 1m
重量	10 - 15 kg
重量	22 - 33 lbs
电源	400 V 50 Hz 3 相
兼容软管孔径	3.2, 6.4 mm

下表列出了恒速泵的详细规格。有关驱动器、交流电机和逆变器选件的更多详细信息，请联系您当地的 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 代表。


## 主要材料

521F, 带 REMC 泵头	
排液口组件	Hytrel, PP (聚丙烯)
流体连接接头	PP (聚丙烯), PVDF
密封件	Neoprene

列出的信息涵盖整个恒速泵系列。

有关单个型号/组件和其他驱动器/泵头选件的详细规格，请参阅用户手册或联系您当地的 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 代表。

## 521F, 带 REMC 泵头 外形尺寸

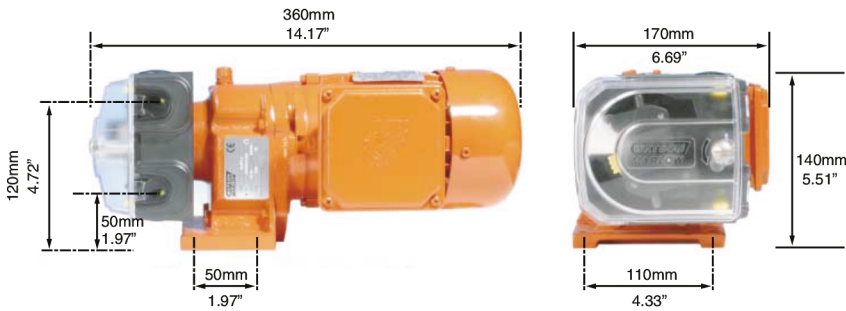

## 控制选项

泵驱动器	521F
三相交流电机变速箱, 有三种速度可选	✓
工业标准电机	✓
调速比 (配备合适的设备)	10:1
可使用合适的设备进行反向操作	✓
可选底板安装	✓

## 产品代码

泵和泵头产品代码				
说明			部件号	
521F/REMC 60rpm 泵			050.8122.EMO	
521F/REMC 213rpm 泵			050.8152.EMO	
521F/REMC 291rpm 泵			050.8172.EMO	
520REMC 泵头			053.1031.EMO	
软管单元产品代码				
	工业用 LoadSure® 软管单元, 快拆型 PVDF 接头		卫生级 LoadSure® 软管单元, 3/4 英寸卫生级 PVDF 接头	
	3.2mm	6.4mm	3.2mm	6.4mm
Marprene TM	902.P032.PFQ	902.P064.PFQ		
STA-PURE PFL	965.M032.PFQ	965.M064.PFQ	965.M032.PFT	965.M064.PFT
Bioprene TM			933.P032.PFT	933.P064.PFT
Sta-Pure PCS			960.M032.PFT	960.M064.PFT

免责声明：以上所有流量是在吸程和背压为 0bar 时泵送 20°C (68°F) 水的实验数据。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Limited 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。GORE 和 STA-PURE 是 W. L. Gore & Associates 的商标。订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



30 November 2023